


Puro

Solución oftálmica
lubricante con
hialuronato sódico al
0.15%

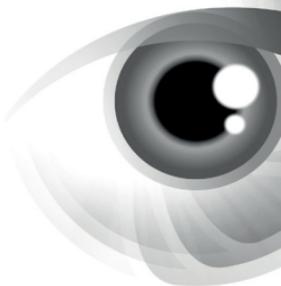

Descripción:

PURO es una solución oftálmica estéril e hipotónica que contiene hialuronato sódico al 0,15%, sin conservantes ni fosfatos.

El hialuronato sódico que contiene el producto se obtiene por fermentación y no es de origen animal.

PURO mantiene y restablece las condiciones fisiológicas de la superficie ocular, la protege e induce una comodidad de larga duración. La ligera hipotonía (aprox. 270 mOsm) y su pH (cuyo valor fisiológico es de aproximadamente 7,2) ayudan a mantener las condiciones óptimas para conservar la salud de la superficie ocular.

Indicaciones:

Tratamiento de los síntomas del ojo seco.

PURO ofrece alivio inmediato y duradero en caso de ojo seco, irritado o cansado debido a la enfermedad del ojo seco y a factores externos como la exposición prolongada a pantallas de video, aire acondicionado, polvo, smog, humo, etc.

PURO está indicado también para usuarios de lentes de contacto de cualquier tipo.

Composición:

Hialuronato sódico al 0,15%

Cloruro sódico, ácido bórico, bórax, agua purificada.

Presentación:

Envase multidosis de 10 ml, para uso oftálmico.

Recomendaciones de uso:

- Lávese y aclárese bien las manos.
- Retire el sello de protección.
- Retire el tapón. Asegúrese de no tocar la punta del envase con los dedos.
- Inclíne ligeramente la cabeza hacia atrás y, con ayuda de la mano libre, tire suavemente del párpado inferior hacia abajo. Con el envase en posición vertical y la boquilla hacia abajo, apriete ligeramente el envase para aplicar una o dos gotas en cada ojo, o del modo indicado por su médico. Evite tocar la punta del envase con los dedos o con el ojo a fin de evitar una posible contaminación.
- Vuelva a cerrar el envase con el tapón.
- El producto puede utilizarse según necesidad.

Precauciones:

No utilice el producto si el envase está dañado.

No comparta el producto con otras personas para evitar una posible contaminación.

Advertencias:

En caso de necesitar aplicar otros tratamientos oftálmicos, se recomienda esperar un intervalo de al menos 15 minutos entre los dos tratamientos.

Para evitar una posible contaminación, evite el contacto de la boquilla con cualquier superficie.

No usar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes.

Pueden producirse casos raros de irritación ocular leve después de la instilación. Interrumpa el uso si sufre dolor, enrojecimiento o un cambio de la visión después de la instilación.

Consulte a su médico si sus síntomas persisten o empeoran.

Si sufre visión borrosa después de la instilación, espere a que su visión se aclare antes de conducir o utilizar máquinas.

No ingerir la solución.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Si el problema persiste, consulte a un médico.

No instile **PURO** junto con otras sustancias para evitar posibles cambios en los efectos esperados.

Condiciones de conservación:

Conservar el envase a una temperatura inferior a 30°C.

No use el producto una vez superada la fecha indicada en el mismo.

Una vez abierto, la solución debe usarse en 90 días.

El residuo del producto debe eliminarse de conformidad con la normativa local vigente.

Fecha de la última revisión del texto: julio de 2018



Conservar a una temperatura inferior a 30°C.



No usar si el envase está dañado.



Lea las instrucciones de uso.



Advertencia: lea las instrucciones de uso.

STERILE A Esterilizado con técnicas de esterilización asepticas.

CE 0123



Fabricante:
Tubilux Pharma SpA.
Via Costarica, 20/22 – 00071 Pomezia (RM)

LFHYS10100

Distribuido por:
NTC OPHTHALMICS IBERICA, S.L.U.
CALLE PINAR, 5
28006 Madrid España

 **ntc** ophthalmics
Novelty. Technology. Care.